



ГОСПИТАЛЬНЫЙ СПЕКТР ИЗДЕЛИЙ ИЗ АВТОКЛАВИРУЕМОЙ ПЛАСТМАССЫ

Технические данные

Материал, из которого изготовлены все изделия — гомополимер полипропилен.

Рабочая температура от 4 до 137 градусов Цельсия, максимальная температура 150 градусов Цельсия. Продукция предназначена для многократного мытья и автоклавирования. Компания-производитель гарантирует 1000 циклов обработки.

Все изделия разработаны в соответствии с Британским стандартом BS5442 на больничные ёмкости и отвечают требованиям Директивы ЕС93/42 по медицинским изделиям, обозначены европейским знаком качества.

Продукция Ворвик может быть стерилизована путем автоклавирования в паровых автоклавах, обработки окисью этилена, большинством стерилизационных растворов, а также путём низкотемпературной плазменной стерилизации. Автоклавы должны соответствовать Британскому стандарту BS3970, моечные машины — Британскому стандарту BS2745.

Каждое изделие имеет товарный код по международным стандартам 39.26.90999. и одобрено Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами FDA.

Информация по обработке

Для обеспечения стерильности необходимо обеспечить свободный доступ пара к внутренним поверхностям емкостей и удаления вакуума. Согласно общим правилам, изделия не должны быть туго завернуты, при их укладке в автоклав необходимо располагать их таким образом, чтобы обеспечить подход к ним пара и не подвергать сдавливанию.


Полипропилен относится к материалам 5-го класса и может быть подвергнут обработке. При нагревании изделий до температуры выше 330 градусов Цельсия материал разлагается на воду и окись углерода, которые могут быть нейтрализованы струей воды в соответствии с действующими правилами борьбы с огнем.



Warwick Sasco Limited
17-18 Longfield Road
Leamington Spa, CV31 1XB
United Kingdom
web: www.sasco.co.uk

Импортер: ООО ЮНЭКС
тел. (495) 781-84-79
e-mail: contact@paramed.ru
www.paramed.ru




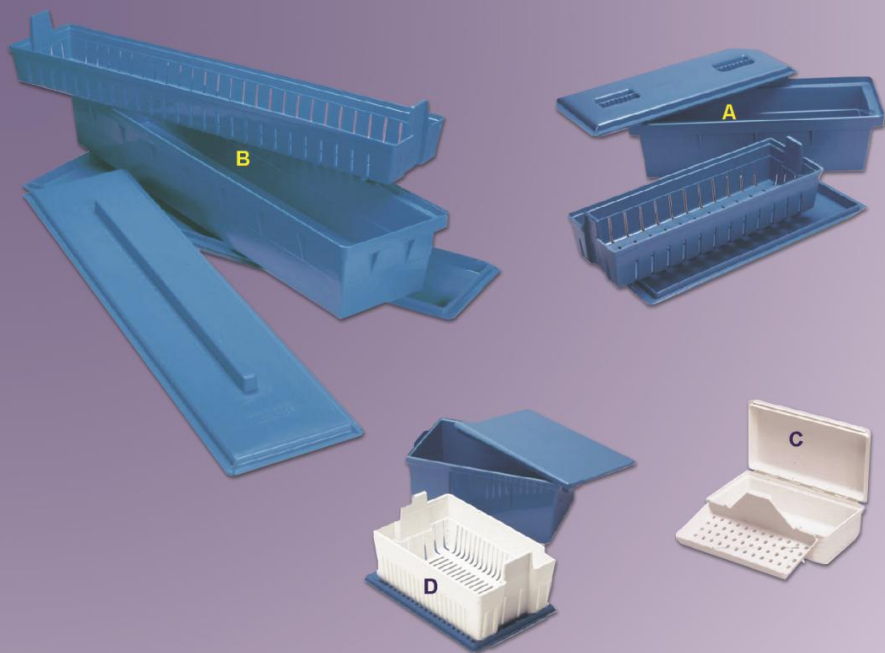

Емкости и наборы для замачивания, очистки и дезинфекции в стерилизационных растворах инструментов и эндоскопов

Код	Наименование	Объем	Размер, мм
A DSS4215	Емкость для стерилизации с лотком, крышкой, поддоном.	4 л	426x156x138
B DSS8515	Емкость для стерилизации с крышкой, поддоном и внутренним лотком.	12 л	890x200x145
C DSS1000	Емкость для стерилизации с лотком, крышкой.	1 л	260x130x65
D DSS2718	Емкость для стерилизации с лотком, крышкой.	3 л	257x180x128

Метод обработки: Вся продукция автоклавируется при температуре до 135 градусов Цельсия.

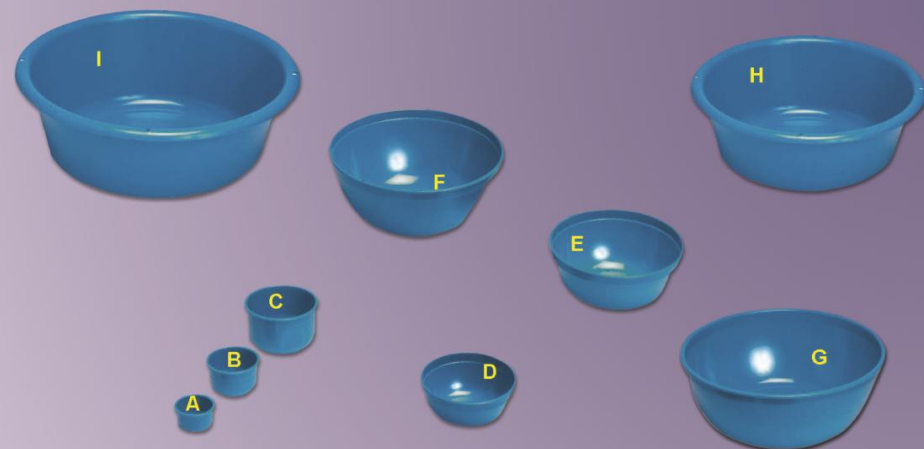

Емкости для использования в операционных и процедурных кабинетах

Чашки для стерильных растворов

Код	Объем	Диаметр, мм	Глубина, мм
A GP40	35 мл	40	30
B GB60	94мл	60	40
C GP80	280мл	80	60


Емкости круглые градуированные

D LB100	0,28л	100	45
E LB150	0,75л	150	70
F LB200	1,5л	200	90
G LB250	3л	250	105

Тазы градуированные

H WB3112	3л	310	105
I WB3513	5л	350	120

Метод обработки: Вся продукция подлежит автоклавированию. Окончательная стерилизация достигается автоклавированием при температуре 134,7 градусов Цельсия при давлении 2,2 бара в течение 3 минут 30 секунд.

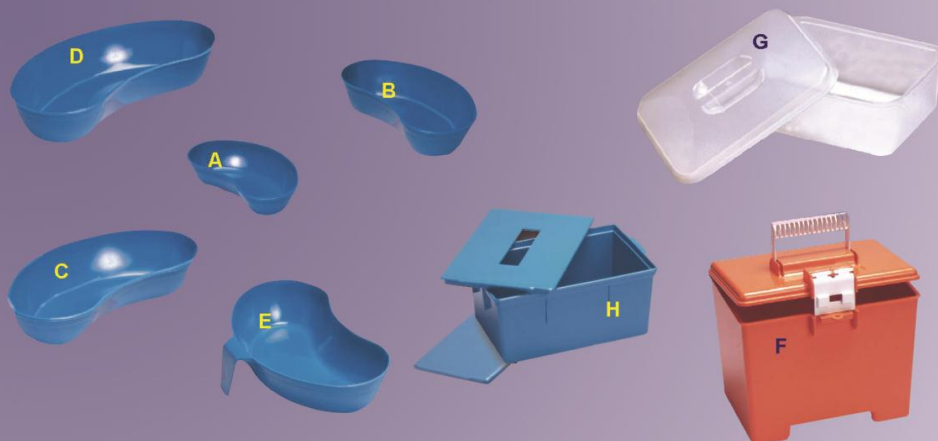

Почкообразные лотки градуированные

Код	Объем	Длина, мм	Глубина, мм	Ширина, мм
A KD150	120мл	150	35	75
B KD200	300мл	200	45	98
C KD250	600мл	250	55	130
D KD300	1,5л	300	65	144


Почкообразный лоток градуированный с ручкой

Код	Объем	Длина, мм	Глубина, мм
E VB300	1250 мл	300	65

Емкости для хранения и транспортировки

Код	Наименование	Длина,мм	Ширина,мм	Глубина,мм
F MB2318	Емкость транспортировочная с крышкой	230	180	200
G IBXN290	Емкость прозрачная с крышкой	300	224	140
H IBX2718	Емкость для стерилизации с крышкой	257	180	128


Метод обработки: Все лотки и емкости с крышками IBXN290, IBX2718 подлежат автоклавированию. Окончательная стерилизация достигается при автоклавировании при температуре 134,7 градусов Цельсия при давлении 2,2 бара в течение 3 минут 30 секунд. Емкость транспортировочная с крышкой MB2318 подлежит химической дезинфекции.

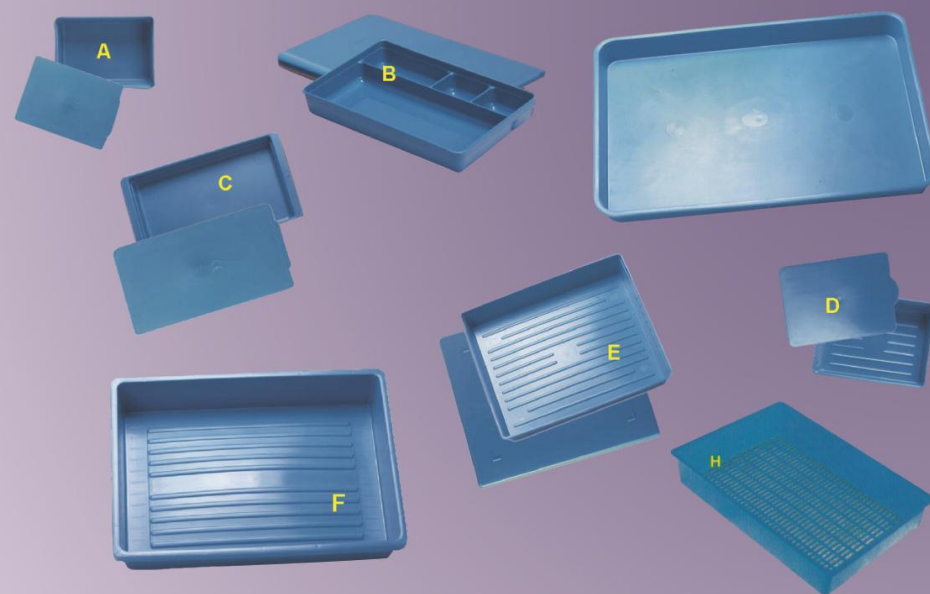

Лотки с крышками для единичных инструментов и операционных наборов

Код	Наименование	Длина,мм	Ширина,мм	Глубина,мм
A IT1813	Лоток прямоугольный с крышкой	181	134	54
B IT1913	Лоток для процедурной с 4-мя отсеками с крышкой	270	180	41
C IT2715	Лоток прямоугольный с крышкой	270	150	30
D IT2015	Лоток для процедурной с крышкой	200	150	51
E IT3025	Лоток для перевязочного набора с крышкой	300	250	52
F IT4030	Лоток для последа	420	305	75
H MT4030	Лоток перфорированный для лотка IT4030	424	308	75

Метод обработки: Все лотки подлежат автоклавированию. Окончательная стерилизация достигается автоклавированием при температуре 134,7 градусов Цельсия при давлении 2,2 бара в течение 3 минут 30 секунд.

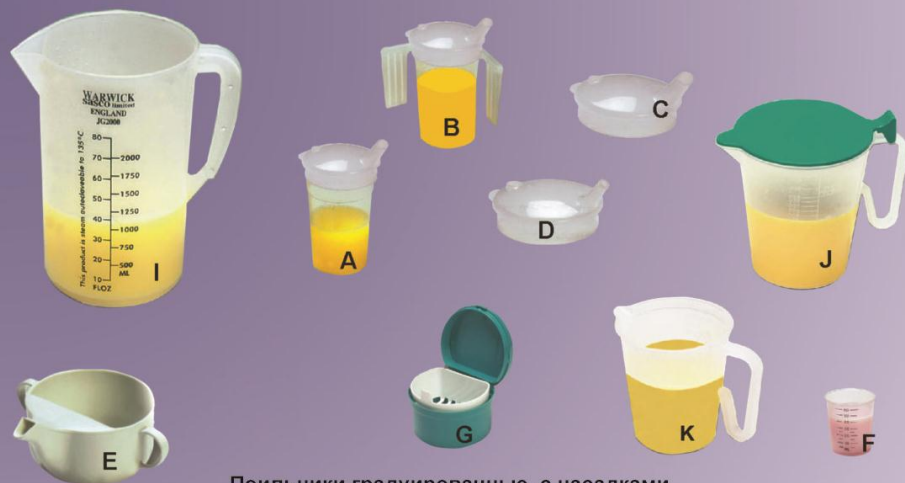

Поильники градуированные, с насадками

A. BFC250-BMS	Поильник градуированный со средним носиком	200 мл
B. BFH250-BMS	Поильник градуированный с ручками, со средним носиком	200 мл
C. BWS	Насадка для поильника с широким носиком	
D. BNS	Насадка для поильника с узким носиком	
E. TFB	Поильник Классик	250 мл

Стаканчик мерный, емкость для съемных зубов

Код	Наименование	Объем
F. MM60BL	Стаканчик мерный	60 мл
G. DNT	Емкость для съемных зубов	

Кружки градуированные

Код	Наименование	Объем
I. JG2000	Кружка градуированная	2 л
J. JGL1000	Кружка градуированная с крышкой	1 л
K. JG500	Кружка градуированная	0,5 л

Метод обработки: Поильники, насадки, стаканчики мерные, емкости для съемных зубов подлежат химической дезинфекции. Кувшины градуированные подлежат автоклавированию. Окончательная стерилизация достигается автоклавированием при температуре 134,7 градусов Цельсия при давлении 2,2 бара в течение 3 минут 30 секунд.



Судна, утки мужские и женские.
Современные, удобные в использовании, легко моются

Код	Наименование
A. FPN	Судно с крышкой и ручкой
B. CBL	Ведро с крышкой 26x26x14 см
C. PUF1000	Судно женское гигиеническое
D. UF1000	Утка женская градуированная с ручкой 1 литр
I. UBS1000	Утка мужская градуированная с крышкой и ручкой 1 литр
F. UM1000	Утка мужская градуированная с крышкой 1 литр
G. UM750	Утка мужская градуированная с крышкой 750 мл

Методы обработки: Судно FPN – автоклавировается при температуре до 120 градусов Цельсия при давлении 2,3 бара. Ведро с крышкой CBL, судно PUF1000, утки UF1000, UBS1000, UM1000, UM750 подлежат химической дезинфекции.